

NECK MASSAGER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


РУССКИЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- [1] Neck Massager
- [2] Сетевой адаптер

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала эксплуатации проверьте, соответствует ли сетевое напряжение напряжению, указанному на штепсельной вилке. Присоедините кабель к прибору, если Вы этого ещё не сделали, затем вставьте вилку в сеть. После этого включите прибор при помощи кнопок управления.

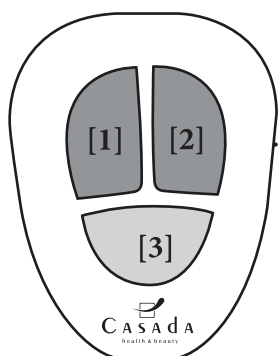

УПРАВЛЕНИЕ

[1] Вибрация

Нажатие на эту клавишу активирует функции вибрации. Доступно два режима. При повторном нажатии режим изменяется. Для остановки нажмите на клавишу еще раз.

[2] Тепло

Дополнительное подключение функции прогрева. Режим доступен только во время выполнения функции Шиатцу.

[3] Шиатцу

При нажатии на кнопку Шиатцу, Вы активируете 15-ти минутную программу массажа. Повторное нажатие изменяет направление вращения массажных головок. Для досрочного прекращения массажа, нажмите на Шиатцу ещё раз.

ХРАНЕНИЕ / УХОД

1. Рекомендуется хранить в сухом, защищенном от пыли месте с размотанным кабелем.
2. Не хранить рядом с системами отопления и открытым огнем. Не подвергать непосредственному воздействию солнечных лучей.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации массажера внимательно прочтите следующие правила, чтобы достичь безупречного функциониро-




МАССАЖ ШИАТЦУ



ВИБРАЦИЯ



ПРОГРЕВ

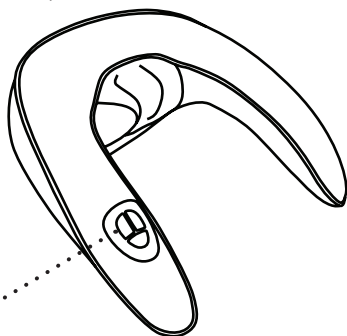

вания прибора и его оптимального воздействия. Просьба сохранять Правила в течение всего времени эксплуатации.

Массаж соответствует общепринятым техническим принципам и современным требованиям к безопасности.

Аппарат не требует специального обслуживания. В случае возможных неполадок ремонт может производиться только уполномоченными специалистами. Нецелевое применение аппарата и неавторизованный ремонт запрещены из соображений безопасности и приведут к утрате гарантий.

Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.

Избегайте попадания на аппарат воды, не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.

Не используйте аппарат с поврежденной вилкой, шнуром или разболтанными местами крепления. Если вилка или шнур повреждены, их следует заменить у производителя, в сервисном центре или с привлечением квалифицированного персонала. При нарушениях в работе немедленно отключите аппарат от электропитания. Использование не по назначению или неправильное использование исключают всякую ответственность производителя за причиненный ущерб.

Дети могут пользоваться аппаратом только под присмотром взрослых.

Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в 15 минут.

Дети могут пользоваться аппаратом только под присмотром взрослых.

Чтобы не превышать уровень воздей-

ствия на мышечную и нервную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в 15 минут.

Любой массаж, даже мануальный противопоказан в случае беременности, недавние травмы, тромбозы, воспаления и опухоли любого происхождения, а также рак. Для использования аппарата в лечебных целях рекомендуется консультация с врачом.

Если Вы используете электронные приборы, например сердечный стимулятор, каждый раз перед массажем Вам необходимо проконсультироваться с врачом.





ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ИСПРАВЛЕНИЕ
• Аппарат подключен к сети питания, но ни сам прибор, ни пульт дистанционного управления не работают.	• Проверьте присоединение к сетевому кабелю. • При очень долгом использовании аппарат может перегреться. Выключите его и дайте остыть в течение 30-60 минут.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует директиве 2006/95/ЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 35 x 35 x 18 см
Номинальная мощность: 30 Ватт
Напряжение: AC 220 В~50-60 Гц DC 12В, 2,5А
Вес: 1,5 кг
Сертификаты:    

Генеральный импортер в России:

ООО «Альфа БС»
109518, Москва,
ул. Грайвороновская, д.4 стр.1
тел: (495) 229-45-32
факс: (495) 229-45-33

Эл. адрес: info@casada.ru
Адрес в интернете: www.casada.ru
Авторское право на изображение и тексты принадлежит «Casada International GmbH», они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.
Авторское право © 2012 г.
Casada International GmbH
Все права защищены.